

# Duette

CONTACT LENSES

Transforme su visión  
con Duette.



Manejo y Cuidado de los Lentes


SynergEyes

## Qué esperar:

Los lentes Duette® ofrecen una excelente visión, día y noche.

Es normal el percibir los lentes durante los primeros días, mientras se adapta a la sensación de los lentes híbridos de tecnología avanzada Duette, pero esta percepción disminuirá con el tiempo..

Duette® combina dos tipos de materiales en un sólo lente. El centro está compuesto de un material rígido para brindar una excelente y estable visión. La faldilla suave mantiene a los lentes cómodos durante el día. No hay otro lente de contacto que haga uso del diseño de material dual para proporcionar excelente visión y comodidad en el mismo lente.

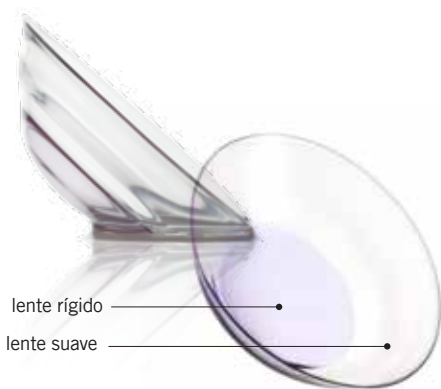

## Colocación:

Siempre lave sus manos con jabón suave y séquelas bien con una toalla libre de pelusas antes de manipular el lente.

Es una buena idea el manipular sus lentes siempre en el mismo orden en cada ocasión, para ayudar a evitar el confundirlos de lado.

Colocar un lente Duette es como colocar un lente suave.



1. Coloque el lente en la punta del dedo.

Si lo desea, se puede añadir una gota de lubricante libre de conservadores al fondo del lente.



2. Retraiga su párpado inferior y suavemente coloque el lente en su ojo. Lentamente suelte su párpado y parpadee en varias ocasiones.



Visite [www.SynergEyes.com](http://www.SynergEyes.com) para ver videos sobre el manejo y cuidado, y para conocer más sobre Duette.

## Retirar:



1. Con una mano, retraiga su párpado superior.



2. Usando su dedo en la mano opuesta, suavemente retraiga su párpado inferior.



3. Con los dedos secos, pellizque suavemente la parte inferior de la faldilla suave en las posiciones de 5 y 7 del reloj – manteniendo las yemas de los dedos juntas. Mantenga el pellizco durante 2 segundos y levante el lente hacia afuera de su ojo. Seque sus dedos antes de retirar el otro lente.

Cuál es la diferencia entre retirar el lente Duette y un lente de contacto suave?

- Los lentes suaves se retiran flexionándolos completamente.
- El lente Duette no se flexiona en su parte central, así que se debe retirar con un ligero pellizco en la posición de las 5 y 7 del reloj, como si se estuviera retirando una pelusa de la ropa.

## Cuidado:

Limpie sus lentes Duette diariamente.



1. Coloque el lente sobre la palma de su mano, con la concavidad hacia arriba. Enjuague el lente con una solución limpiadora diaria aprobada tanto para uso en lentes suaves como para en lentes rígidos. Nunca use agua de la llave para enjuagar o guardar sus lentes.
2. Con la yema de su dedo índice, suavemente frote el lente completo en un movimiento circular contra la palma de su dedo. Asegúrese de limpiar completamente ambas superficies del lente y finalmente enjuáguelo con solución salina.
3. Guarde sus lentes en un sistema a base de peróxido de hidrógeno o en una solución desinfectante multi-propósito.

*Utilice las soluciones recomendadas por su especialista.*

El reemplazo recomendado para los lentes Duette es de cada seis meses.

Es importante que siempre siga las instrucciones de su especialista de la salud visual. En base a sus requerimientos particulares, su especialista pudiera recomendar un periodo de reemplazo distinto.

## Soluciones de Limpieza

Sistemas de Desinfección (utilice una solución a base de peróxido de hidrógeno o una solución multi-propósito)

soluciones recomendadas:

El estándar de mantenimiento para lentes de contacto recomienda el uso de un limpiador diario aprobado tanto para lentes suaves, como para lentes rígidos permeables al gas.

En caso necesario, utilice gotas humectantes aprobadas para lentes suaves y para lentes rígidos permeables al gas, siguiendo las indicaciones de su especialista.

\*En algunos paciente la química de la lágrima puede reaccionar con el peróxido de hidrógeno, generando un anillo blanco en la unión del material suave y el material rígido. Este anillo no afecta la comodidad ni la visión.

Evite el uso de cosméticos a base de aceite ya que pudieran dañar la superficie de sus lentes Duette de manera permanente.